

Un réseau national d'orthoprothésistes

Au service de votre autonomie et de votre bien-être...

Agen :	05 53 68 05 64	Montpellier :	04 67 52 47 48
Arnas :	09 70 75 55 40	Moulins :	04 70 46 85 46
Amiens :	03 22 50 37 60	Mulhouse :	03 89 34 12 82
Angers :	02 41 44 20 88	Nancy :	03 83 85 41 41
Avignon :	04 90 85 11 76	Nantes :	02 51 89 92 43
Bayonne :	05 59 70 56 61	Niort :	05 49 35 30 30
Besançon :	03 81 41 54 54	Nogent/Marne :	01 48 72 96 81
Bordeaux :	05 57 26 10 40	Paris 13° orthèse	01 45 86 63 63
Bourg-en-Bresse :	04 74 21 19 00	Paris 13° prothèse	01 46 20 10 19
Brest :	02 90 82 84 74	Paris 16° :	01 40 50 26 39
Brive :	05 55 17 24 18	Paris 17° :	01 42 93 92 10
Carqueiranne :	04 94 48 28 92	Périgueux :	05 53 54 36 50
Chambéry-Annecy :	04 79 85 71 21	Perpignan :	04 68 68 33 23
Chalon sur Saône :	03 85 93 67 79	Plérin :	02 96 52 42 06
Caen :	02 31 15 58 58	Poitiers :	05 49 38 87 17
Chartres :	02 43 39 22 90	Reims :	03 26 47 49 29
Cherbourg :	02 33 22 59 05	Rennes :	02 99 67 35 34
Clermont-Ferrand :	04 73 28 44 95	Roscoff :	02 98 29 39 55
Dijon :	03 80 78 42 00	Rouen :	02 35 88 17 25
Gap :	04 13 19 12 11	Saint-Nazaire :	02 51 89 92 43
Laval :	02 43 56 42 45	Saint-Quentin :	03 23 67 67 39
Le Mans :	02 43 39 22 90	Saint-Etienne :	04 77 57 62 64
Lorient :	02.56.54.81.81	St Malo :	02 99 40 10 91
Limoges :	05.87.41.83.03	Toulouse :	05 61 40 49 18
Lille :	03 20 04 41 71	Tours :	02 47 28 91 59
Lons le Saunier :	03 84 25 91 86	Valence :	04 75 40 81 40
Lyon :	04 72 84 77 30	Vannes :	02 97 62 00 02
Marseille :	04 91 79 32 44	Versailles :	01 39 55 45 38
Melun :	01 64 09 42 18	Vichy :	04 70 59 23 39
Metz :	03 87 74 41 32		
Mont-de-Marsan :	05 58 51 14 68		
Montluçon :	04 70 64 35 37		

Pour plus d'information sur les établissements PROTEOR :


www.proteor.fr



www.orthopedie.proteor.fr
rubrique : notre réseau

NOTICE D'UTILISATION

PROTHESE CONTACT DE MEMBRE SUPERIEUR

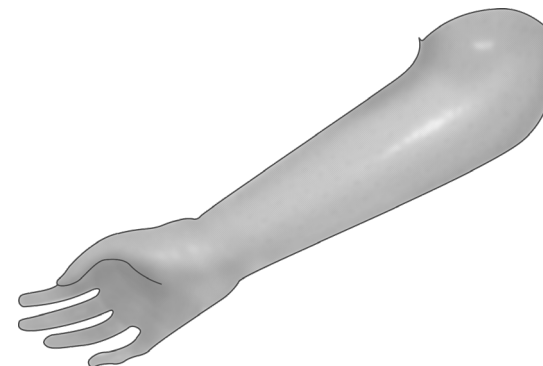

Vous venez de bénéficier d'un appareil orthopédique, dispositif médical sur mesure. Afin de vous garantir un confort maximal, merci de lire attentivement cette notice. Votre appareil a été fabriqué par un Orthoprothésiste agréé, selon la prescription de votre médecin.

Sa confection a été réalisée à vos mesures, et il ne peut être utilisé que par vous-même. Les instructions concernant le port et l'utilisation de votre appareillage sont définies par votre médecin prescripteur : il faut les respecter strictement. Le numéro de l'appareil et la date de fabrication sont indiqués sur l'appareil.

Protection des données : Pour connaître le détail de la Politique de Protection des données mise en œuvre au sein de Proteor, toutes demandes doivent être adressées au Délégué à la Protection des Données : dpo@proteor.com



Groupe PROTEOR
6 rue de la Redoute
21850 St Apollinaire

DESCRIPTION, PERFORMANCE ET DESTINATION DU DISPOSITIF :

Prothèse constituée de :

- une emboîture réalisée dans l'un des matériaux suivants : matières plastiques et/ou résine ;
- un manchon intermédiaire éventuel (copolymère, silicone...) ;
- un système de fixation (plongeur avec verrou, valve d'obturation...) ;
- un coude artificiel pour les amputations de bras ;
- un tube ou une structure exosquelétique ;
- une articulation de poignet fixe ou mobile ;
- un effecteur terminal (main, outil...) et la commande par câble éventuelle ;
- un gant de recouvrement en PVC ou en silicone pour les mains

Chaque prothèse est personnelle car réalisée par un orthoprothésiste diplômé d'après un moulage orienté et une prise de mesures, suivant les indications du médecin spécialiste.

CONDITIONS NORMALES DE MISE EN PLACE :

La prothèse est placée directement au contact du moignon à l'aide d'un chausse prothèse de préférence.

L'utilisation d'une valve d'obturation est possible pour assurer un meilleur maintien de la prothèse.

En cas d'utilisation de manchons adhérents (copolymère, silicone), ceux-ci doivent être déroulés sur le moignon à même la peau et sans laisser d'air entre le moignon et le manchon.

L'ensemble moignon-manchon est ensuite glissé et verrouillé dans le fond de l'emboîture.

S'assurer du bon verrouillage en exerçant une pression sur l'emboîture.

Pour mettre en place correctement une emboîture contact, le moignon doit être bien sec.

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION :

Une prothèse contact de membre supérieur de vie sociale est utilisée quotidiennement dans des conditions de vie courante, vie familiale, professionnelle. Votre prothèse a été réalisée en fonction de votre poids et de l'activité que vous nous avez indiquée. Si vous désirez pratiquer des activités susceptibles de faire subir des contraintes élevées à votre appareillage, consultez votre prothésiste habituel pour savoir si cela est possible.

N'allez pas dans l'eau avec votre prothèse (sauf si elle est prévue pour cet usage). Ne l'exposer pas à la corrosion.

CONDITIONS D'ENTRETIEN :

Un nettoyage quotidien du moignon, de l'emboîture et du manchon avec un savon doux est indispensable

L'utilisateur doit essuyer avec une serviette l'intérieur de son emboîture et son manchon chaque soir. Il est possible d'utiliser une éponge légèrement humide avec du savon doux (rincer à l'eau claire ensuite).

ARTICULATIONS :

Ne pas mouiller les articulations et n'utiliser aucun solvant. Un nettoyage supprimant une accumulation de poussière est recommandé régulièrement. Un léger graissage avec une huile fluide est possible.

CONDITIONS DE STOCKAGE/ELIMINATION :

Votre appareillage doit être entreposé dans un endroit sec et aéré. Eviter toute source de chaleur importante et le rayonnement solaire direct. Ne jamais laisser votre appareillage derrière une vitre ou un pare-brise de voiture. Le rayonnement solaire peut engendrer une déformation de l'appareillage. Stocker si possible votre appareil horizontalement pour éviter toute chute risquant d'engendrer une fêlure ou une déformation de votre emboîture.

Votre appareillage peut être éliminé selon la législation en vigueur.

EFFETS SECONDAIRES :

Problème allergique cutané aux matériaux :

↳ Réalisez des tests cutanés auprès d'un dermatologue pour confirmer le problème d'allergie.

Echauffement du moignon suite à un jeu emboîture - moignon trop important :

↳ Contacter rapidement votre orthoprothésiste,

Irritations, phlyctène, tuméfactions sur zones d'appui :

↳ Contacter rapidement votre orthoprothésiste,

Dans tous les cas d'inconfort important au niveau du moignon, contactez rapidement votre orthoprothésiste habituel.

CONTRÔLES :

Un contrôle de votre appareil au minimum une fois par année est indispensable afin de procéder à la remise en état de votre prothèse.

En cas de desserrage éventuel de visserie ou prise de jeu anormale, contactez votre prothésiste habituel le plus rapidement possible.

Vous devez disposer de 2 prothèses utilisables en bon état. Utilisez régulièrement votre prothèse de secours afin de contrôler qu'elle est adaptée et en état de fonctionnement en cas d'indisponibilité de votre prothèse habituelle.

Si vous utilisez un manchon avec accrochage distal, vérifiez le serrage du doigt de verrouillage avant de placer votre prothèse.

En cas d'anomalie, n'hésitez pas à contacter votre prothésiste habituel pour toute intervention. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être notifié à votre orthoprothésiste et aux autorités compétentes relatives aux dispositifs médicaux.