


ETHOS™ LP

LOW PROFILE IN HOCHLEISTUNG



MOVEMENT
MADE
EASY

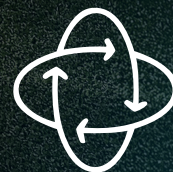

#HUMANFIRST



ETHOS™ LP

CHAMPION IN PUNKTO
LEICHTGEWICHT
UND COMPLIANCE

Niedrige Bauhöhe. Geringes Gewicht. Hohe Anpassungsfähigkeit.
ETHOS LP kombiniert eine außergewöhnlich geringe Bauhöhe mit exzellenter Anpassung an das Terrain, natürlicher Flexibilität und hervorragender multiaxialer Compliance. Das Ergebnis ist ein geschmeidiges, zuverlässiges und sicheres Gehen auf jedem Untergrund.

Entwickelt für Anwender, die Wert auf natürliche Bewegung, ganztägigen Komfort und Tragbarkeit auf jedem Untergrund legen.



Half-Rocker-Sohlenplatte: Entwickelt für konstanten Bodenkontakt, sanftes Abrollen und hervorragende Bodenadaptation.



Geteilter Kiel und Ferse: Passt sich unebenem Gelände, Steigungen und Gegenständen auf dem Boden an.



Wasserfest: Beständig gegen Süß-, Meer- und Chlorwasser.



Keine Verschraubungen: zur Eliminierung toter Punkte.





Fersenpuffer: dämpft Stöße beim Auftreten.



FUSIONFLEX COMPOSITE TECHNOLOGY

Eine leichte dreischichtige (Oreo-) Verbundkonstruktion, die folgende Eigenschaften miteinander verbindet:

- Langlebigkeit und Flexibilität dank Glasfaserkern
- Reaktionsfähigkeit durch Außenlagen aus Kohlefaser

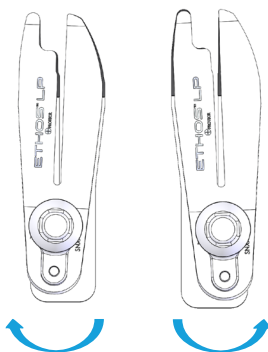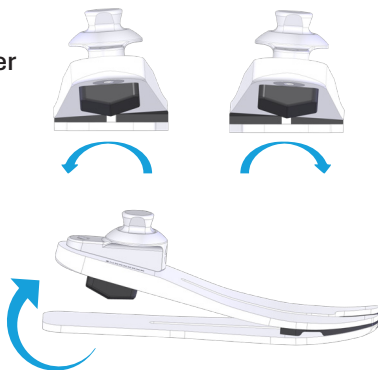

BEWEGUNG LEICHT GEMACHT

± 8° axiale Rotation
± 16.5° Inversion und Eversion

MULTIAXIALE ROTATIONSPLATTE

Die speziell entwickelte Gummimischung sorgt für mehr Komfort und Sicherheit. Sie ermöglicht eine unabhängige Funktion, die eine axiale Drehung sowie Inversion und Eversion erlaubt und eine Trennung von Ferse und Kiel ermöglicht.

Sie wurde für eine hervorragende Flexibilität entwickelt, um eine bessere Bodenadaptation zu ermöglichen und die inneren und äußeren Rotationskräfte zu reduzieren.

Available in
EVAQ8®

ETHOS™ LP

LOW PROFILE IN HOCHLEISTUNG


ETHOS LP



JETZT ERHÄLTICH MIT
EVAQ8®

Product ID	Größe (cm)	Einbauhöhe	Gewicht*	Kategorie	Seite	Sandal Toe	Absatzhöhe
LP3-00	22 bis 25	57 mm	425 g	1 bis 9	R / L	ja	10 mm
	26 bis 28	58 mm	485 g				
	29 bis 30	63 mm	656 g				
LP3-V3	26 bis 28	58 mm	525 g				
	29 bis 30	63 mm	696 g				

*26 cm, Kat. 4, Modul mit Fußkosmetik

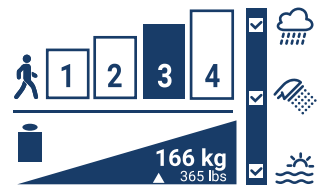

Auswahl basierend auf dem Gewicht des Anwenders und dem Belastungsgrad für ETHOS LP										
Gewicht/ Belastungsgrad	44-52kg	53-59kg	60-68kg	69-77kg	78-88kg	89-100kg	101-116kg	117-130kg	131-147kg	148-166kg
Niedrig	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Normal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Hoch	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-

LP3-__O__A__S__

Modell
Standard: 00
EVAQ8: V3

Kategorie
1-9

Seite
R- Rechts
L- Links

Größe
22-30

FTC-2K-1__4-S__


Größe
22-30

Farbe
L-Hell
M-Mittel
D-Dunkel

Seite
R- Rechts
L- Links



ETHOS LP KIDS

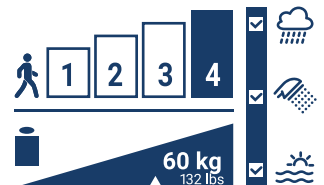

Product ID	Kategorie	Größe (cm)	Sandal Toe	Absatzhöhe	Einbauhöhe	Gewicht
LP3-00	1P bis 9P	19 bis 21	nein	10 mm	42 mm	275 g

Auswahl basierend auf dem Gewicht des Anwenders und dem Belastungsgrad für ETHOS LP KIDS				
Gewicht/ Belastungsgrad	<26kg	26-36kg	36-45kg	46-60kg
Hoch	1P	2P	3P	4P

*20 cm, Kat. 2P, Modul mit Fußkosmetik

LP3-00-O__P__RU

Kategorie
1-4

Größe
19-21

FTC-2M-1__4-R__

Größe
19-21

Farbe
L-Hell
M-Mittel
D-Dunkel

Seite
R- Rechts
L- Links



Customer Service
Telefon: +49 (0)69 96 21 76 604
Kostenfrei: 00800 2806 2806
Email: cs@proteor.com



20261203-DE-PL-00158-ETHOS